

braintronics®

Body&Mind syncSystem


CASADA
healthcare



time to relax



Ръководство за потребителя AURA



time to relax

Още от създаването си през 2000 година марката CASADA е синоним на висококачествени продукти в областта на уелнеса и фитнеса.

Днес продуктите CASADA се предлагат в страни по цял свят. Продуктите CASADA се отличават с постоянно усъвършенстване, оригинален дизайн и стриктна насоченост към подобряване качеството на живот, както и с надеждно и превъзходно качество.

Поздравления!

С покупката на този масажен уред Вие доказахте, че се отнасяте съзнателно към своето здраве.

За да можете да ползвате дълго време предимствата на уреда, моля прочетете внимателно указанията за безопасност и ги спазвайте.

Надяваме се с удоволствие да се насладите на своя собствен AURA.

Съдържание

Инструкции за безопасност	4
Противопоказания	5
Описание на продукта	6
Подготовка за употреба	7
Инструкции за монтаж	8
Поддръжка и съхранение	11
Отстраняване на неизправности	12
Характеристики	12
Декларация за съответствие	12
Масажни техники	13
Дистанционно управление	17
Braintronics	27
Гаранционни условия	35

Инструкции за безопасност



Преди да използвате масажното кресло, моля прочетете внимателно инструкциите, за да осигурите безпроблемното му функциониране и ефективност. Моля пазете това ръководство!

- Масажното кресло е в съответствие с всички европейски стандарти и действащи разпоредби за безопасност.
- Масажното кресло има подгряващи елементи. Подгряващата функция не се препоръчва за лица със силна чувствителност към топлина. Креслото отговаря на европейският стандарт (IEC 60335-2-32).
- Масажиращото кресло не се нуждае от допълнителна поддръжка. Всеки необходим ремонт трябва да бъде извършван в оторизиран сервиз.
- Всеки неоторизиран ремонт и неправилна употреба на креслото води до отпадане на гаранцията!
- За да избегнете наранявания, моля не слагайте ръцете си между масажиращите ролки.
- Не докосвайте щепсела на креслото с мокри или влажни ръце.
- Не позволявайте креслото да бъде излагано продължително време на високи температури или слънчева светлина. Избягвайте да мокрите креслото с вода или други течности!
- Не използвайте креслото в помещения с висока влажност, като баня и др.
- Не използвайте креслото в помещения с недостатъчно пространство, лоша или не работеща вентилация, помещения с недостиг на свеж въздух!
- За да се избегне рискът от късо съединение, изключвайте креслото от контактната мрежа, когато не се използва за дълъг период от време.
- Не използвайте неизправни или повредени щепсели, захранващи кабели, разклонители или контакти.
- При повреда или неизправност на захранващия кабел или щепсела, те трябва да бъдат поправени или подменени **САМО** в оторизиран сервиз!
- В случай на неизправност или повреда, веднага изключете креслото от контакта.
- Производителят не носи отговорност при повреда, ако креслото е било използвано неправилно.
- За да избегнете пренатоварване на мускулите, не надвишавайте препоръчителното време от 30 минути масаж на ден.
- За да избегнете нараняване на креслото, пазете го от остри предмети.
- За да намалите риска от късо съединение или пожар, е важно да използвате само контакти в изправност и такива, в които щепселът влиза плътно и докрай.
- Изключете креслото от контакта след употреба и преди да го почистите.
- Не позволявайте на деца да почистват или използват креслото без надзор.
- Ако по време на употреба спре токът, незабавно изключете креслото с бутона "OFF", след което и от контакта, за да го предпазите от повреди.
- Не използвайте креслото, ако захранващият кабел е мокър или повреден.
- Лица под 14 годишна възраст или с физически или психически заболявания не бива да използват креслото без надзор на човек, отговарящ за тяхната безопасност.
- Не използвайте креслото веднага след ядене или в състояние на алкохолно или наркотично опиянение.
- Използвайте креслото само по предназначение според съответните инструкции.
- Използвайте само и единствено аксесоари, произведени за конкретния модел масажно кресло.
- За да избегнете повреда на креслото, моля не се изправяйте, не сядайте и не подскачайте върху възглавничките за стъпала.
- За да избегнете нараняване, моля не се опитвайте да седнете върху подлакътниците или облегалката.
- Моля почиствайте редовно креслото, за да предотвратите натрупването на мръсотия в процепите.
- За да изключите креслото, моля не дърпайте кабела, а хванете щепсела и го издърпайте от контакта.
- Когато настройвате облегалката или възглавничките за стъпалата, уверете се, че под тях няма нищо, което може да бъде прищипано или повредено.
- Креслото е предназначено само за домашна употреба.
- Ако захранващият кабел бъде повреден, трябва да се замени със същия модел кабел или друг кабел, подходящ за конкретния модел масажно кресло, но **само в оторизиран сервиз!**

Противопоказания

Ако не сте сигурни дали трябва да използвате масажното кресло, се консултирайте с Вашия личен лекар!

- Използването на масажното кресло е строго забранено при бременност, както и при следните оплаквания и заболявания: скорошни наранявания и травми, тромбозни заболявания, всякакъв вид възпаления, рак и др. Ако подлежите на някакъв вид медицинска терапия или се лекувате от заболяване, моля консултирайте се с личния си лекар, преди да използвате масажното кресло.
- Лица с психически, физически или когнитивни увреждания, както и лица без опит и познания за уреда, могат да използват масажното кресло само и единствено под надзора на лицата, отговорни за тяхната безопасност!
- За да се избегне дискомфорт и наранявания, когато се използва креслото, следните лица трябва да се консултират предварително с лекар:
 - лица с текущи здравословни проблеми;
 - лица подлежащи на редовни медицински манипулации;
 - лица с остри болки в гърба и проблеми с гръбначния стълб;
 - лица с пейсмейкър;
- Ако изпитате болка по време на масажа, незабавно го прекратете.
- Ако се нараните, докато използвате масажното кресло, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Не се препоръчва да масажирате зачервени, подути или възпалени части от тялото.
- Масажното кресло е предвидено само за домашна употреба, като разтоварващ уред. Не може да се ползва като заместител на какъвто и да е вид терапия.
- Препоръчително е масажното кресло да се ползва максимално по 30 минути на ден. Отделните части на тялото - максимално по 15 минути. Всяко превишаване на препоръчителното време може да има обратен ефект.
- Този уред не е препоръчителен за лица под 14 годишна възраст.
- Не е препоръчително лица под 14 годишна възраст да бъдат оставяни без надзор около масажното кресло.

„Braintronics” функцията не се препоръчва за лица със следните заболявания:


- Различни видове психоза (шизофрения, биполарно разстройство, депресия)
- Раздвояване на личността
- Епилепсия, гърчове и др.
- Заболявания на сърцето
- Заболявания на централната нервна система
- Тромбоза
- Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
- Скорошен инфаркт или инсулт
- Умствено увреждане
- Алкохолна, наркотична или медикаментозна зависимост
- Редовен прием на психотропни вещества
- Бременност

ВНИМАНИЕ! “BRAINTRONICS“ функцията не трябва да бъде използвана върху деца без изричното знание и разрешение на техните настойници.

Този продукт на “CASADA” отговаря на всички стандарти за електромагнитни полета (EMF). При правилна употреба, според инструкциите в това ръководство, продукта е напълно безопасен за здравето!

Описание на продукта


1. Възглавница за врата
2. Bluetooth високоговорител
3. Облегалка
4. Бутони за бърз достъп
5. Възглавница за седалката
6. Масаж за раменете
7. LED Лого
8. Подлакътник
9. Дистанционно управление
10. Страничен панел
11. Възглавница за ходилата

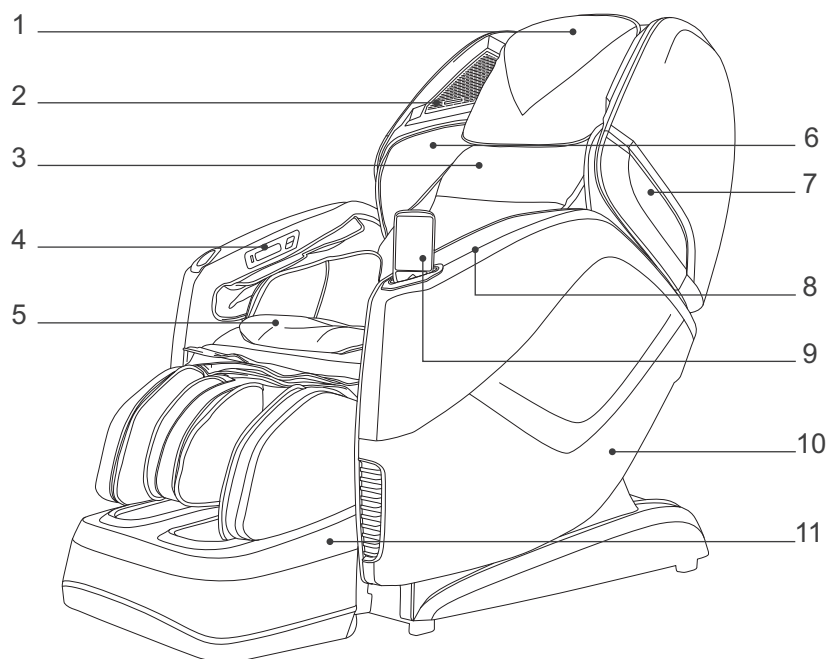


2 Въздушни възглавници

12 Въздушни възглавници

6 Въздушни възглавници

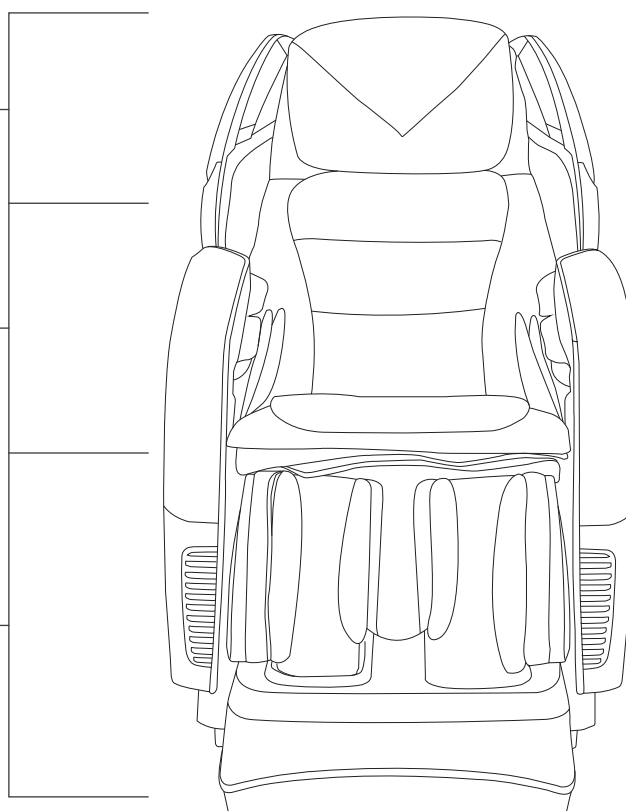

Подготовка за употреба

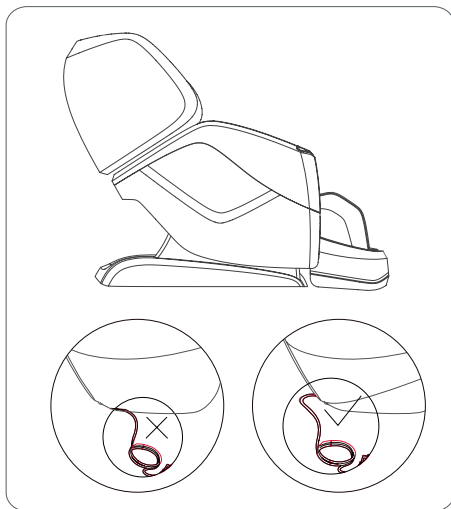


1. Поставете масажното кресло в добре вентилирана стая или помещение, в което няма влага.

- Уверете се, че около креслото има достатъчно пространство, за да може облегалката да се наведе.
- За да предпазите пода и да намалите шума от креслото, поставете килим или подложка отдолу.
- Уверете се, че креслото не се допира до нищо отпред и отзад.
- Моля, не поставяйте креслото върху мокър или неравен под
- За да избегнете нарушаване на сигнала, моля поставете креслото на разстояние най-малко 1 метър от телевизор или радио
- Моля, не излагайте креслото на директна слънчева светлина или на високи температури. Това може да увреди или втвърди кожата на креслото.

ВНИМАНИЕ!

Не поставяйте захранващия кабел под креслото. Това може да го повреди. Проверявайте периодически за повреди и неизправности по захранващия кабел!

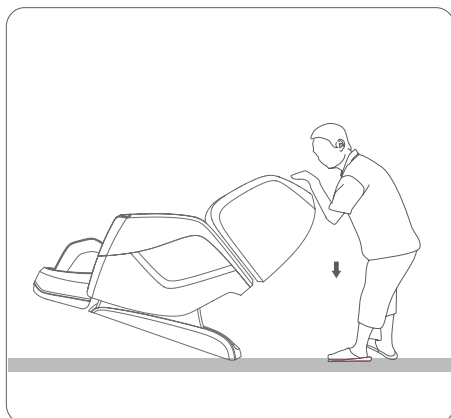

2. Преместване на креслото


- Както е илюстрирано на схемата, за да преместите креслото, натиснете облегалката надолу. Наклонете я до ъгъл от 45 градуса спрямо пода и използвайте колелцата.
- Бавно избутайте масажното кресло до желаното от Вас място.
- Бавно и внимателно изправете гърба на креслото, докато основата му не легне напълно на пода.

ВНИМАНИЕ!

- Преди да преместите креслото, върнете възглавницата за ходилата в първоначалната позиция.
- Не местете креслото, докато работи или някой го използва.
- Преместването на креслото, може да повреди пода. Препоръчително е да се използва килим, черга, подложка и др., за да се предпази пода.
- Не се препоръчва рязкото пускане на креслото по време на преместването му. Това може да повреди креслото!
- Препоръчително е креслото да бъде местено от двама души

Инструкции за монтаж

1. Моля отстранете опаковката и извадете всички части.

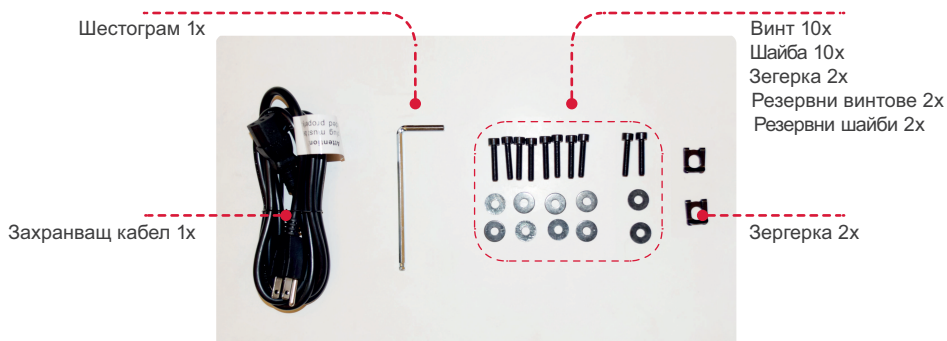


Масажно кресло



Възглавница за ходилата




Ляв страничен панел

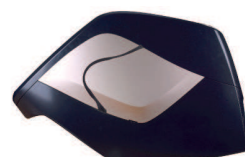


Десен страничен панел

1.1 Премахнете капака на страничните панели, използвайки платнените ленти.

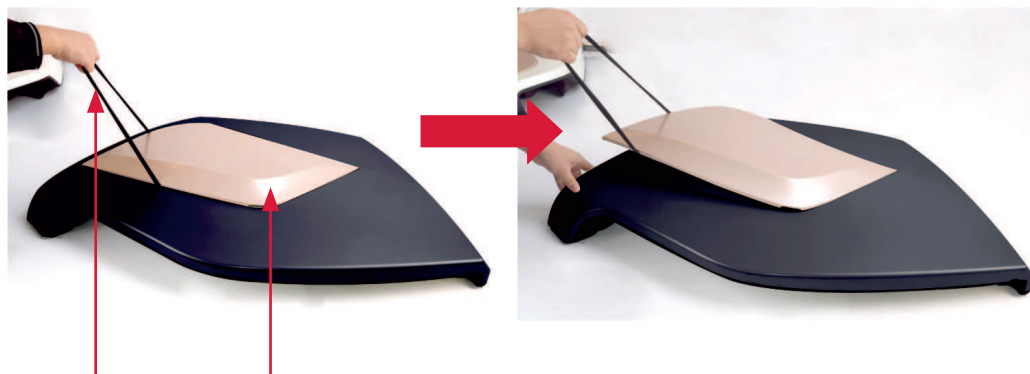

1.2 Поставете захранващия кабел, след което го свържете в електрическата мрежа, за да може креслото да се върне в началната си позиция.

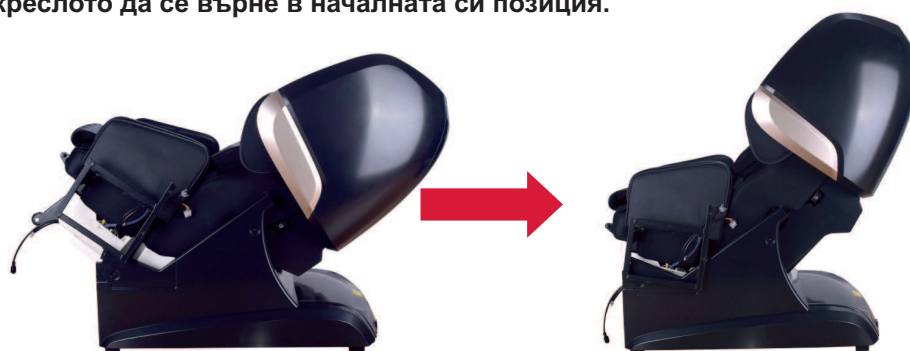


Позиция на креслото преди включване


Позиция на креслото след включване

2. Сглобяване на възглавницата за ходилата.

Свържете захранващия кабел на възглавницата за ходилата и маркуча за въздух.

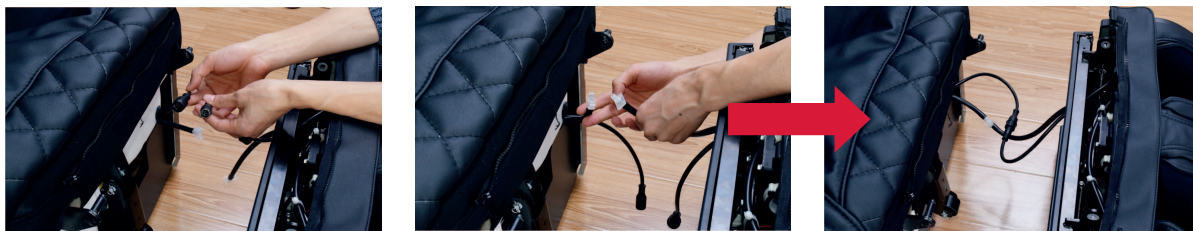


2.1. Закачете възглавницата за ходилата за основата на седалката и я затегнете с обтегач.

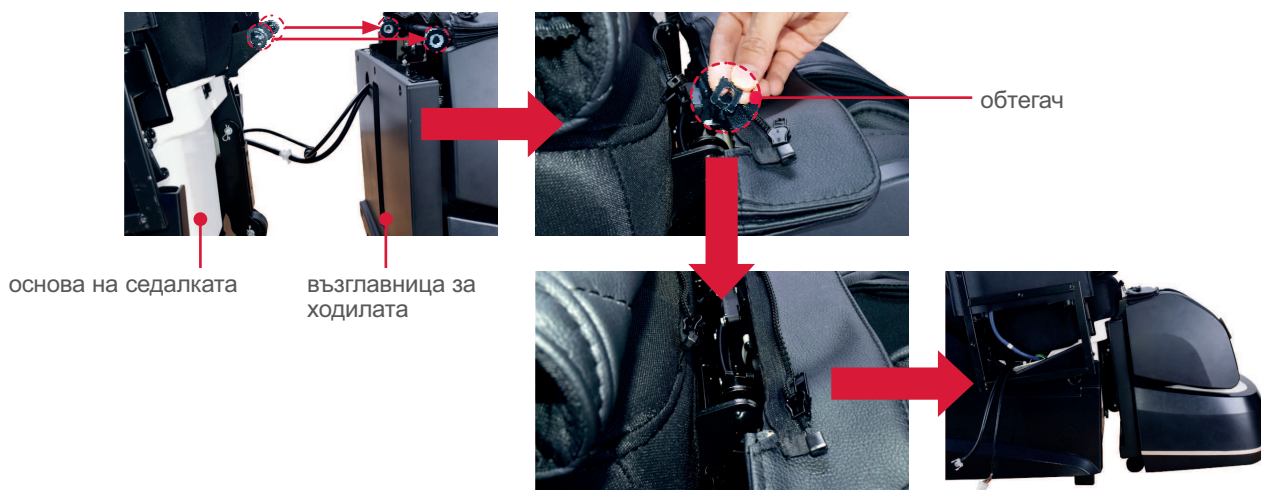


3. Монтирайте страничните панели

Изравнете точка „А“ на страничния панел с точка „В“ на корпуса на креслото. Закрепете страничния панел за корпуса.

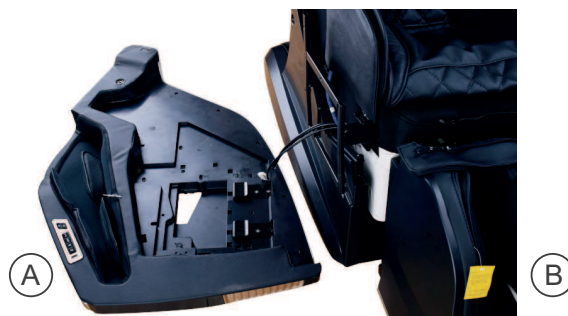


3.1. Захранващия кабел и маркуча за въздух трябва да минат през канала, предвиден за тях, и да се свържат със съответните отвори на корпуса.

Пъхнете кабелите през този отвор.

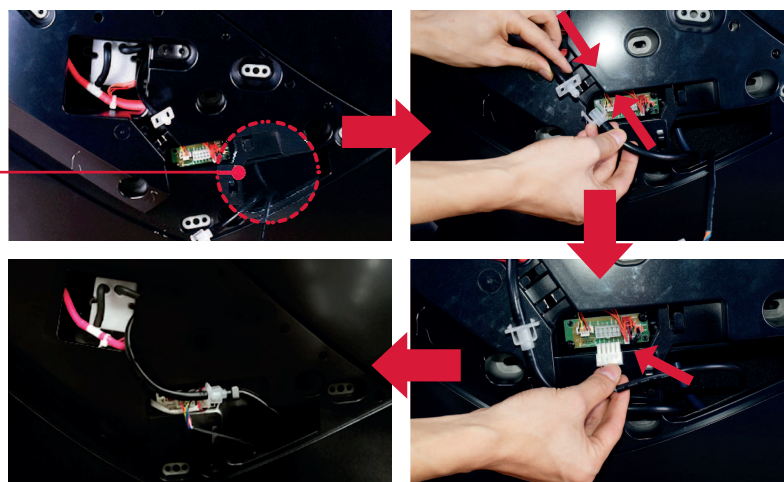

Инструкции за монтаж


3.2. Използвайте 4 винта, за да закрепите страничния панел.

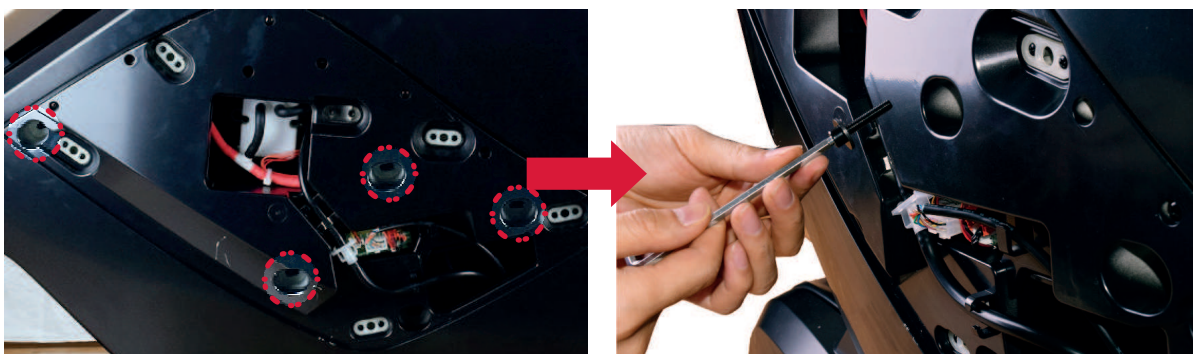

3.3. За да върнете капака на страничния панел, поставете го на място и с леко потупване по краищата на капака го закрепете на място.



4. Монтиране на възглавницата на седалката.
Закопчайте ципа между седалката и възглавницата за ходилата.

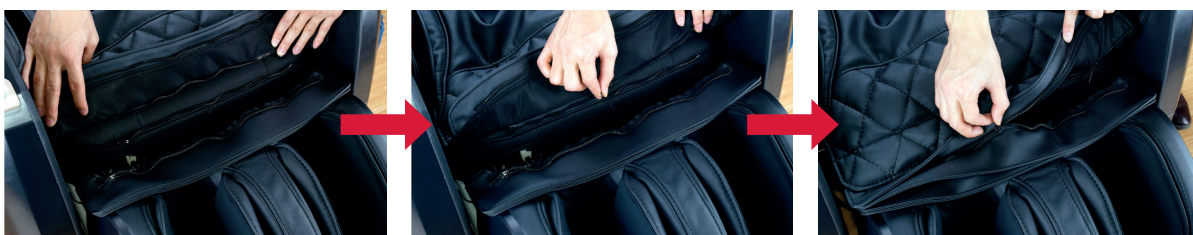

4.1. Възглавницата на седалката се закрепя с цип от лявата и от дясната страна.



4.2. Закрепете възглавницата на седалката за облегалката, използвайки велкро лентата.

Поддръжка и съхранение

1. Почистване на еко кожата

Забършете внимателно еко кожата с мека и суха кърпа. Не почиствайте креслото с препарати съдържащи силни химикали, като разтворители, бензол и спирт. Уверете се, че препаратът за почистване на еко кожа, който ще използвате, е подходящ за това кресло, като прочетете упътването на етикета на препарата. Ако еко кожата е силно замърсена, почистете по следния начин:

1. Намокрете мека кърпа в гореща вода или не агресивен препарат за почистване и я изстискайте.
2. Уверете се, че кърпата е добре изстискана, така че да не капе вода/препарат от нея.
3. Внимателно избършете еко кожата с меката кърпа.
4. Изплаквайте често кърпата, докато почиствате креслото.
5. Оставете еко кожата да изсъхне сама, не използвайте сешоар.

- Повърхността на еко кожата може да избледнее или да се обезцвети, ако се използва неподходящ препарат за почистване. Изпробвайте препаратът на малка зона от кожата, преди да почистите изцяло креслото.
- Почистването на креслото с препарати на спиртна или бензолова основа, може да доведе до обезцветяване или увреждане на цвета на кожата.

2. Почистване на пластмасовите елементи.

1. За да почистите на пластмасовите елементи, използвайте мека кърпа. Намокрете я в гореща вода с разтворен не агресивен препарат. Добре изстискайте кърпата и внимателно забършете пластмасовите елементи.
2. Не използвайте химикали и препарати като разреждатели, бензин и спирт. Това може да увреди пластмасовите елементи!
3. Почистете пластмасовите елементи с микрофибърна или мека кърпа. Накиснете я предварително в чиста вода, изстискайте я и след това избършете пластмасовите елементи.
4. Оставете креслото да изсъхне по естествен начин. Не използвайте сешоар.

3. Съхранение.

- Когато не използвате креслото за по-дълъг период от време, изключете го от контактната мрежа. Навийте кабела и се уверете, че креслото се съхранява в сухо помещение.
- Не съхранявайте креслото в помещения с високи температури. Не го излагайте на влага. Не поставяйте креслото в близост до открит огън. Избягвайте да излагате креслото продължително време на пряка слънчева светлина.
- Моля, използвайте само препарати за почистване и подържане, които са предназначени за еко кожа. Не използвайте химикали и препарати на базата на спирт или бензол.
- Ако креслото е поставено на неравна повърхност, не го бутайте или дърпайте. Повдигнете го, за да го преместите.
- Винаги правете почивки между масажите!

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Отстраняване
<ul style="list-style-type: none"> • Шумът от електромотора се чува по време на работа. • Дистанционното управление не работи нормално. • Креслото спира работа. • Braintronics програмите не се стартират. 	<ul style="list-style-type: none"> • Това е нормален шум по време на работа. • Уверете се, че основният захранващ кабел е правилно поставен в контакта и че бутона за включване на креслото е натиснат. Моля проверете кабела на дистанционното за повреди. • Креслото се самоизключва, след като е изминало предварително заложеното му работно време. Това удължава живота на креслото и предотвратява повреди. • Уверете се, че апликацията Braintronics е успешно инсталирана и Вашият акаунт е активиран. Проверете дали Bluetooth връзката между Вашето мобилно устройство и креслото е осъществена.

Характеристики

Размери:	в изправено положение: 155 x 81 x 122 см. в хоризонтално положение: 202 x 81 x 119 см.
Тегло:	111 кг.
Максимално натоварване:	120 кг.
Напрежение:	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Мощност:	250 W
Оперативно време:	15 минути
Оп. време braintronics:	21 минути









Сертификати:



Декларация за съответствие

Креслото отговаря на Европейския стандарт за регулация EMC 2014/30/EU и LVD 2014/35/EU.

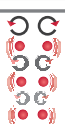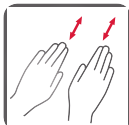Масажни техники

	BRAINTRONICS® <p>Тази технология синхронизира Вашите мозъчни вълни чрез аудио сигнали в комбинация със специално разработена масажна програма. Вашето тяло и ум ще могат да се отпуснат и да отпочинат, без значение с каква цел ще използвате функцията (релакс, сън, стимулация)</p>
SHIATSU	SHIATSU <p>Шиациу масажът е вид масажна терапия с произход от Япония. Тази масажна техника комбинира нежни и ритмични кръгови движения с ръцете, които достигат до всички части на гърба. Целта на масажа е да стимулира и раздвижи мускулите.</p>
	4D MASSAGE <p>Подобреният механизъм на 4D масажа позволява на масажните глави да обхванат по-добре гърба. Масажът се усеща по-ритмичен и ефекта от него достига по-дълбоко в тъканите от традиционните масажни механизми. 4D масажът е по-реалистичен и се доближава най-много до ръчния масаж от всеки друг уред за масаж.</p>
	KNEADING <p>Разтриващият масаж притиска и раздвижва мускулите, имитирайки движения с ръце. Тази техника има за цел да облекчи напрежението в мускулите.</p>
	TAPPING <p>Потупващ масаж. С къси и силни потупвания с ръба на ръката, тази техника подобрява кръвообращението в кожата и отпуска схванатите мускули. Ако се използва на нивото на гърдите, подпомага отделянето на секрети от белите дробове.</p>
	KNEAD & TAP (DUAL ACTION) <p>Комбинация от разтриващ и потупващ масаж.</p>
	ROLLING <p>Приятна масажна техника за релаксация и успокояване на мускулатурата. Подходяща техника за край на масажа. Подобрява мускулния тонус.</p>
	HEATING <p>Подгриваща функция. Топлината прониква дълбоко в тъканите, по този начин можете напълно да релаксирате и да се отпуснете по време на масаж. Тази функция е изключително полезна при схващания на мускулите.</p>
	SOLE ROLLER <p>Масаж на стъпалата. Тази техника масажира нервните окончания, намиращи се на стъпалата, като по този начин стимулира различни органи от тялото. Също така отпуска мускулите.</p>

Масажни техники



AIR COMPRESSION

Притискащите и отпускащи движения при масаж с въздушни възглавници създават естествени рефлексии в мускулите. Това е изключително благоприятно в областта на прасците и ходилата.



SL-SHAPE

SL- образна форма: Благодарение на специалната ергономична "SL" - образна извивка, обхвата на масажирщите глави е 135 см. Това Ви позволява да се наслаждавате на персонален масаж на цялото тяло, от главата до бедрата. Облегалката на креслото е с "S" - образна извивка и нежно поддържа гръбнака.



ZERO SPACE

При легнало положение креслото се премества напред и следователно изисква по-малко дистанция от стената отзад. Спестява място и е удобно!




ZERO GRAVITY

Поставете се на мястото астронавтите - това невероятно усещане за безтегловност.



AUTOMATIC

Специално разработени автоматични програми за цялото тяло, които предлагат голямо разнообразие от различни масажни техники. В допълнение, можете да включите подгряващата функция.

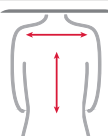

BACK AREA

Регулируем размер на масажната зона.




ADJUSTABLE FOOTREST

Възглавничката за ходилата може да се настрои за всякакъв ръст.



RECLINING POSITION

Отделните настройки на облегалките спомагат за индивидуалното удобство и комфорт на тялото.

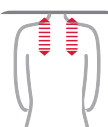

ADJUST SHOULDER

Масажирщите глави могат да бъдат преместени нагоре или надолу до удобна за всеки позиция за масаж на раменете.



AIR INTENSITY

Интензитета на масажа с въздушни възглавници може да бъде променяна.

Масажни техники

	AIR AREA Масаж на цялото тяло чрез въздушни възглавници. Може да се изберат и индивидуални зони на масаж.
	SPOT Масажиращите глави могат да бъдат настроени да масажират определена точка.
	SPEED Скоростта на масажа може да бъде променена.
	WIDTH Разстоянието между масажиращите глави може да бъде променено на тясно, средно или широко.
	MUSIC Допълнителен релакс чрез музикалната функция на креслото.
	BLUETOOTH Безжично прехвърляне на данни.
	HUMAN HANDS FEELING Специално разработените масажиращи глави имитират движенията на професионален масажист. С максимално разстояние от 6.5 см и ъгъл от 41 градуса, механичните ръце са ефективни при масаж на шийни, лумбални и гръбначни прешлени.
	USB-CHARGER Докато се наслаждавате на масажа, можете да зарядите мобилните си устройства през USB зарядното.
	QUICK START Бутони за бърз достъп, удобно разположени в подлакътника, гарантиращи Ви пълен контрол над най-важните функции на креслото.
	ARTHROSE TRACTION Тази функция нежно разтрива, въздействайки стимулиращо върху хрущялите, което подпомага усвояването на хранителните вещества и облекчава симптомите на артроза.

Масажни техники



WAIST STRETCH

Въздушни възглавници в долната част на гърба осигуряват нежно раздвижване на таза и кръста, като ефективно предотвратяват схващания.



HEATED ROLLERS

Това масажно кресло е оборудвано с най-иновативната система за загряване на гърба до момента. Масажиращите глави се нагряват и наподобяват усещането на нагорещени камъни, за да загреят мускулите. В сравнение със стандартните подгряващи системи, тази осигурява по-голяма площ на загряване - от врата до задната част на бедрата.



DUAL SENSOR BODY SCAN

Масажното кресло сканира Вашето тяло, за да установи основните зони за масаж за врата и гърба. По този начин креслото подsigурява оптимален натиск по време на масаж. Можете и ръчно да направите настройки, след като приключи сканирането.



BLUETOOTH AMPHITHEATRE SOUND SPEAKERS

Масажното кресло е оборудвано с Bluetooth технология и амфитеатрална аудио система, намаляваща околния звук и подобряваща удоволствието от Вашия масаж. Благодарение на тази система, Вие можете да се насладите на персонален масаж и релакс, пускайки любимата си музика за медитация от Вашето мобилно устройство. Препоръчително е да включите Bluetooth говорителите на най-слаб звук преди да пуснете музика, след което постепенно да усилвате звука до степента, която желаете.



SLIM LCD TOUCH SCREEN REMOTE CONTROL

Използвайки сензорният дисплей на дистанционното управление, можете лесно, бързо и удобно да изберете желанието от Вас масаж. Също така можете да правите допълнителни настройки на масажите. С дистанционното управление можете да влизате в отделните менюта на креслото, натискайки бутоните:

- Neck/Shoulder (масаж на врата и раменете)
- Lower Back (долната част на гърба и кръста)
- Auto (автоматичен режим)
- Manual (ръчен режим)
- Advanced (допълнителни функции)
- Air Massage (масаж с въздушни възглавници)

Имате достъп и до настройките за продължителност на масажа. Можете да настройвате времето на интервали от 5 минути, започвайки от 5 минути продължителност до 30 минути максимална продължителност.

Дистанционно управление

1. Бутон за включване/изключване

2. (TOUCH SCREEN) Основно масажно меню

Бутони за управление



Дистанционно управление:

1. Бутон включване/изключване (намира се в горната част на дистанционното управление)

- Натиснете този бутон, за да включите масажното кресло. Облегалката и възглавницата за ходилата се настройват автоматично на начална позиция.
- Натиснете бутона отново, за да изключите креслото. Масажният механизъм и облегалката се връщат в начална позиция. Креслото се изключва.

2. Основно масажно меню

Менюто разполага с 6 различни опции:

- Neck/Shoulder (масаж на врата и раменете)
- Lower Back (долната част на гърба и кръста)
- Auto (автоматичен режим)
- Manual (ръчен режим)
- Advanced (допълнителни функции)
- Air Massage (масаж с въздушни възглавници)

Настройки:

- Бутон за настройки се намира в горния десен ъгъл на основното масажно меню.


Дистанционно управление

Бутони за управление




Измерване на раменете

Първо изберете някоя от масажните функции - Neck/Shoulder (врат/рамене), Lower Back (долна част на гърба и кръста), Auto (автоматичен режим), Manual (ръчен режим), за да нагласите масажния механизъм в най-удобната за Вас позиция. Това измерване се включва само веднъж на всяко включване на масажното кресло. Звуков сигнал индикира кога измерването е приключило.

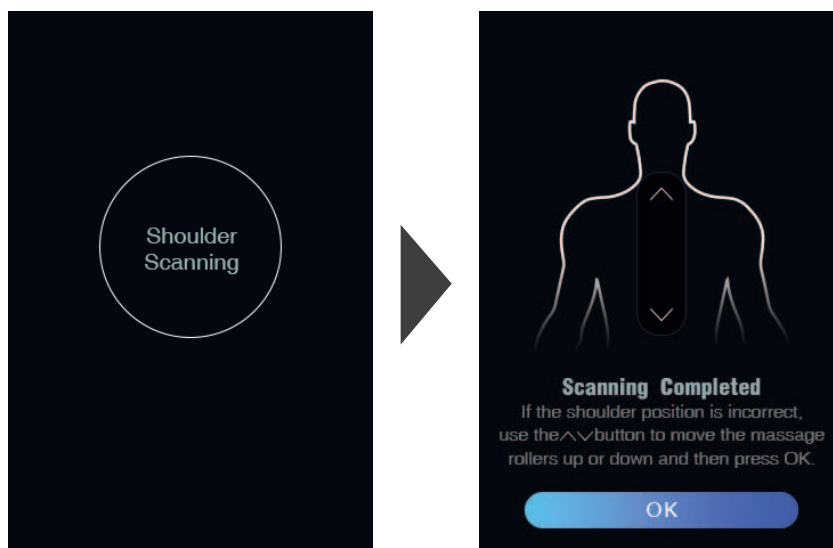

Дистанционно управление

Настройка на позицията на креслото

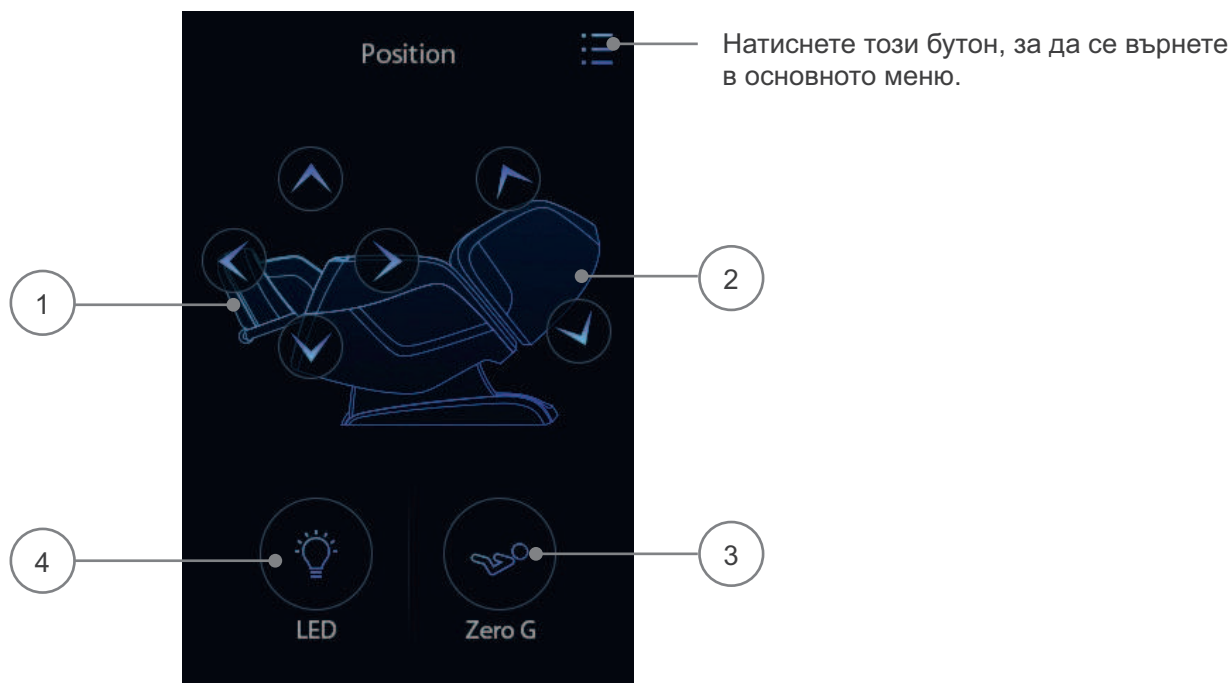

1. Възглавница за ходилата

• Натиснете този бутон, за да повдигнете, или свалите възглавницата за ходилата. Възглавницата за ходилата може да бъде премествана напред или назад. Чрез натискане на сензорния бутон на дисплея, възглавницата за ходилата се връща в първоначалната си позиция.

2. Облегалка

• Натиснете този бутон, за да повдигнете или свалите облегалката. Натиснете отново, за да спрете облегалката в желаната позиция.

3. Бутон за „Нулева гравитация“

• Натиснете този бутон, за да активирате функцията „нулева гравитация“. Натиснете отново, за да върнете креслото в предишната позиция. Тази функция не може да бъде активирана едновременно с функцията „Разтягане“.


4. LED Бутон

• Натиснете този бутон, за да включите или изключите светещото LED лого на CASADA на страничните капаци.

Дистанционно управление

1. Масаж на врата и раменете:


- Изберете Neck/Shoulder (врат и рамене) от основното меню на дистанционното управление.
- Креслото разполага с 4 различни вида масаж на зоната на врата и раменете.
- След като изберете един от четирите вида и масажа започне, дистанционното управление ще премине към страницата с допълнителни настройки.

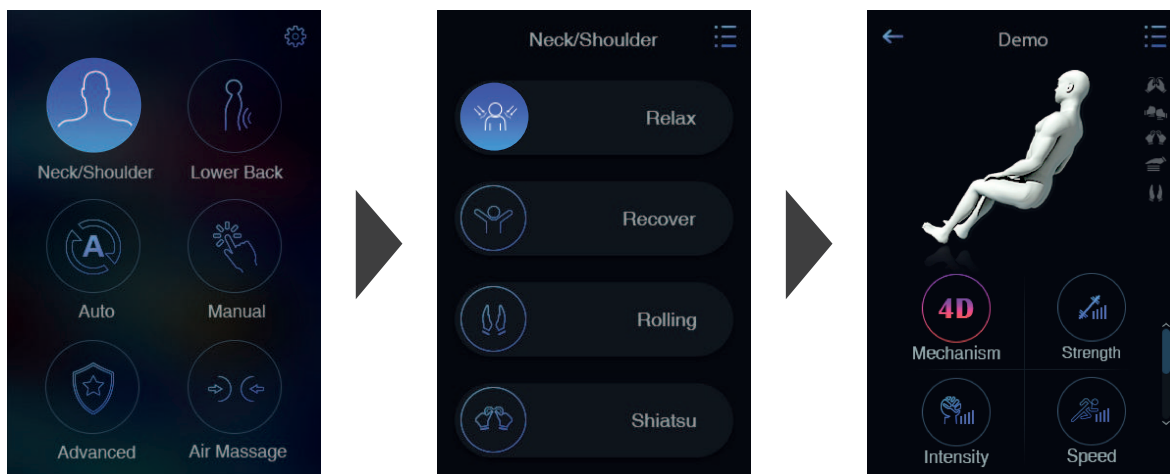

Страницата с допълнителни настройки е налична само за функциите „Врат и рамене“, „Долна част на гърба и кръст“, „Автоматичен режим“, „Ръчен режим“.

Допълнителни настройки:


- **4D** - Интензивността може да се регулира между 8 степени. (Интензивността в автоматичен режим е предварително зададена)
- Силата на натиски при разтриване, интензивността на масажа с въздушни възглавници, скоростта на потупващия масаж могат да бъдат регулирани между 5 степени. (При настройване на силата на масажа с въздушни възглавници, другите две настройки биват предварително зададени).
- Бутона „Назад“ се намира в горния ляв ъгъл на страницата. Натиснете го, за да се върнете на предишната страница.
- Контролният бутон за основната страница се намира в горния десен ъгъл. Натиснете го, за да се върнете на основната страница. Натиснете сензорния бутон, за да се върнете на основната страница и на активната масажна програма.
- Оставащото време на активния масаж се изписва в горния ляв ъгъл на основната страница.
- 15 минути е времето, което е предварително зададено в началото на всеки масаж. Натиснете бутона за настройка на времето, за да промените времето на масажа през интервал от 5 минути, както следва в реда : 15 мин. / 20 мин. / 25 мин. / 30 мин. / 5 мин. / 10 мин. / 15 мин.
- Активният в момента масаж е индикиран в горната дясна част на страницата. Четирите символа индикират : Разтриващ масаж, потупващ масаж, шиацу масаж, роулинг масаж.

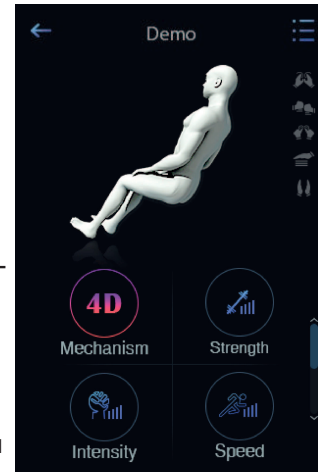

Дистанционно управление


2. Долна част на гърба и кръста

- Креслото разполага с 4 автоматични масажни програми за зона долна част на гърба и кръста. Изберете една от тях, за да стартирате масажа.
- Натиснете посочената икона, за да отворите страницата за „долна част на гърба и кръста“.

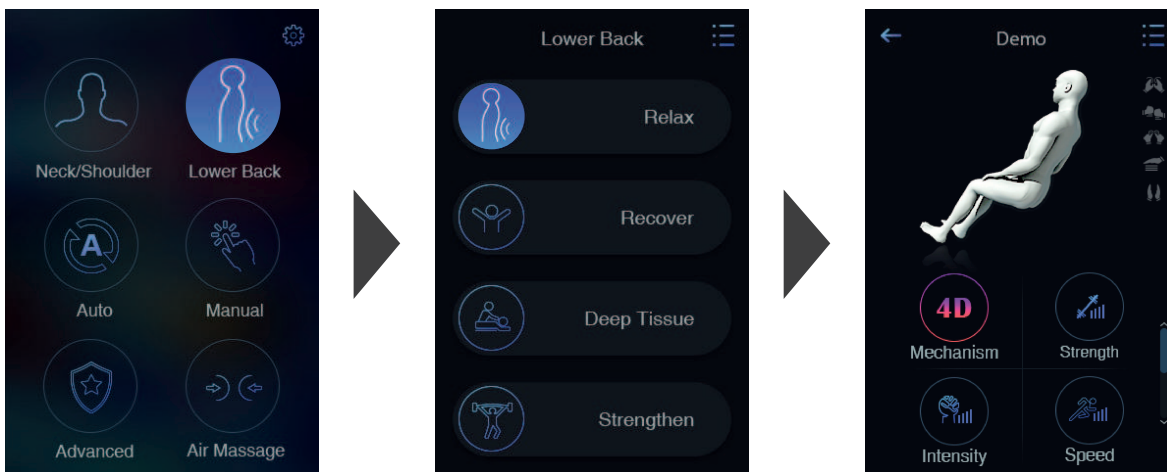

3. Автоматични програми



- Натиснете посочената икона, за да отворите страницата с автоматичните програми.
- Креслото има налични 8 различни автоматични масажни програми. Изберете една от тях, за да стартирате масажа.

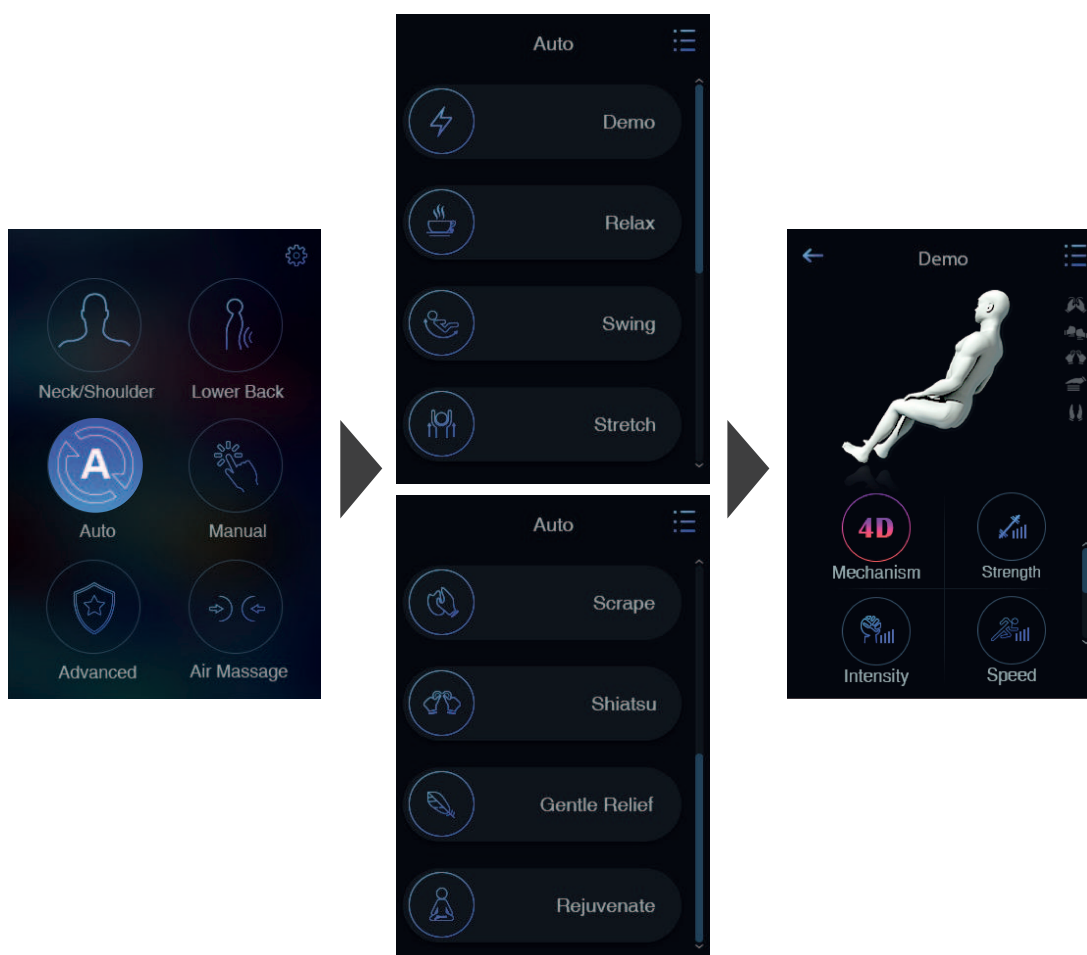

Дистанционно управление

4. Ръчен режим

- Натиснете тази икона, за да отворите страницата за ръчен режим.
- Креслото разполага с 4 програми за различните зони на частичен масаж.
- Изберете желаната от Вас програма, за да започне масажа.
- Функциите „Разтриване“, „Потупване“, „Шиаци“ разполагат с по 2 масажни техники.

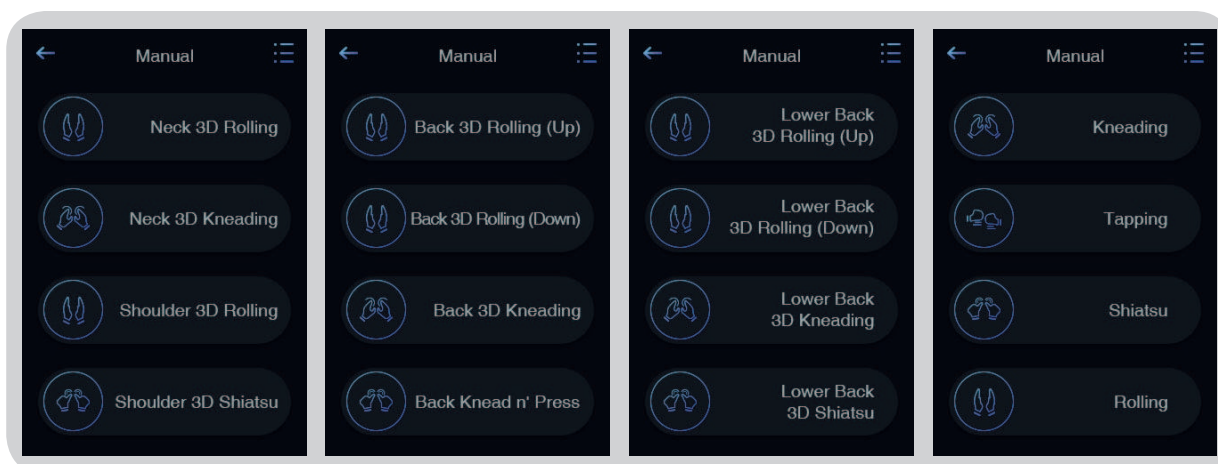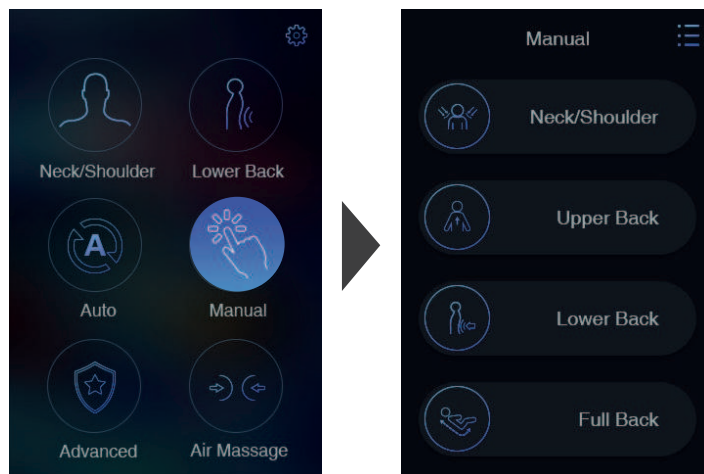


ВНИМАНИЕ!

Натиснете Kneading (Разтриване), Tapping (Потупване), или Shiatsu (Шиаци), един път, за да изберете първата техника на масажиране. Натиснете втори път за втората техника. Натиснете трети път, за да изключите избраната техника.

Дистанционно управление

Ако сте избрали ръчен режим, тази страница ще се покаже.

- По време на 4D масажа, когато масажния механизъм достигне зоните врат и рамене, горната част на гърба, или средната част на гърба, силата на масажа се регулира автоматично. Това позволява масажа да бъде по-прецизен и пълноценен.
- Силата на разтриващия масаж и скоростта на потупващия масаж могат да се регулират на 5 различни степени. Тази настройка може да се ползва само когато е селектирана зона на масаж - цял гръб. Силата на масажа с въздушни възглавници може да се регулира на 5 различни степени.
- Регулиране на масажния механизъм. Той може да се регулира в режим на масаж на цял гръб. Може да се регулира движението на масажния механизъм нагоре и надолу, широчината на масажиране.
- Масажът фокусиращ 1 определена точка от тялото може да бъде разтриващ, потупващ и/или шиаци.
- Масажът фокусиращ 1 зона от тялото масажира зона в размер от 8 см., като може да бъде разтриващ, потупващ, шиаци или ролинг масаж.

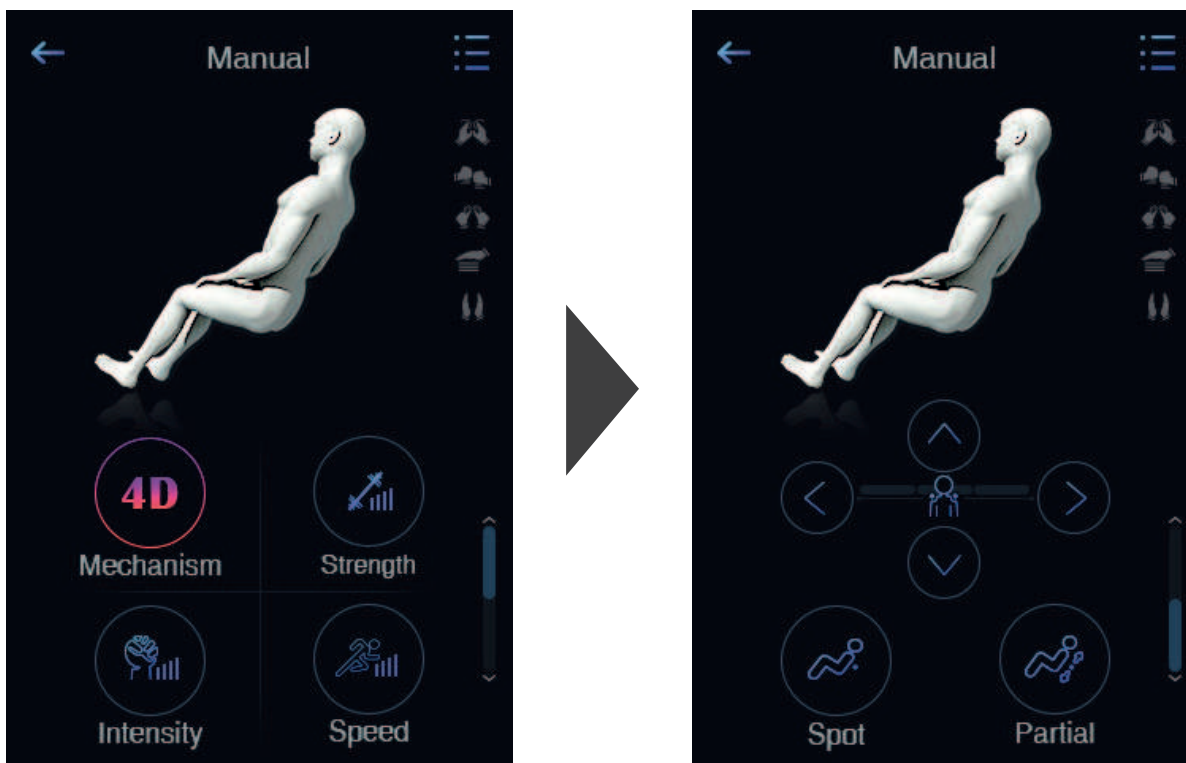


Дистанционно управление

5. Допълнителни функции

- В основното меню изберете "ADVANCED" (допълнителни функции).
- Изберете между 4 основни програми: "HEATING" (подгръване), "FAST AIR" (масаж с въздушни възглавници), "CALF 3D KNEAD" (разтриващ масаж на прасците), "FOOT KNEAD" (разтриване на стъпалата). Можете да използвате всички функции едновременно.

След като сте избрали основна програма, креслото започва с масажа.


- Подгръване - Това масажно кресло разполага с подгръваща функция. Това позволява масажа да има по-интензивен ефект.
- Масаж с въздушни възглавници - Тази програма прилага специален въздушен масаж в зоните на ръцете и средната част на тялото, но не може да бъде използвана заедно с функцията "Air pressure massage"
- Масаж на прасците - Това е разтриващ масаж на прасците.
- Разтриване на стъпалата - Разтриващия механизъм симулира ръчен разтриващ масаж на стъпалата.

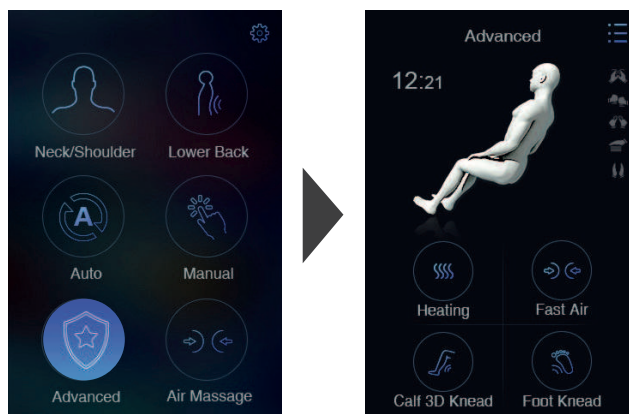

6. Масаж с въздушни възглавници.

- Изберете "AIR MASSAGE" в основното меню.
- Изберете зона за масажирание чрез въздушните възглавници. Можете да изберете: рамене, ръце, долна част на гърба, прасци. Креслото предлага възможността да комбинирате масажа на всички зони. Интензивността на масажа може да бъде регулирана.

След като сте избрали желаната от Вас комбинация, креслото започва масажа.

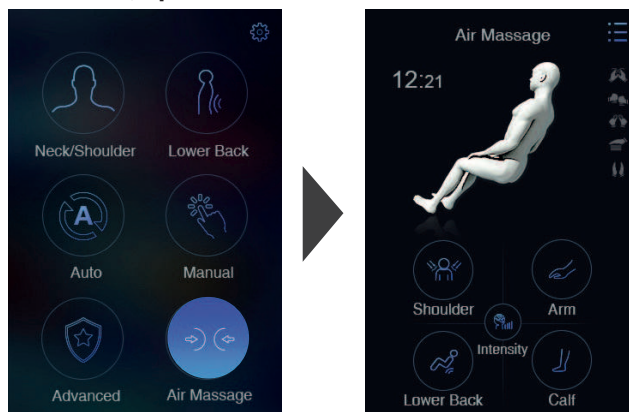


Тази функция на креслото може да бъде използвана в комбинация с ръчния режим!


Дистанционно управление

7. Настройки

- “Language” - изберете език за менюто
- “Volume” - регулирайте силата на звука на креслото
- “Screen Sleep” - регулирайте времето за което дисплея се изключва
- “Screen Brightness” - регулирайте яркостта на дисплея

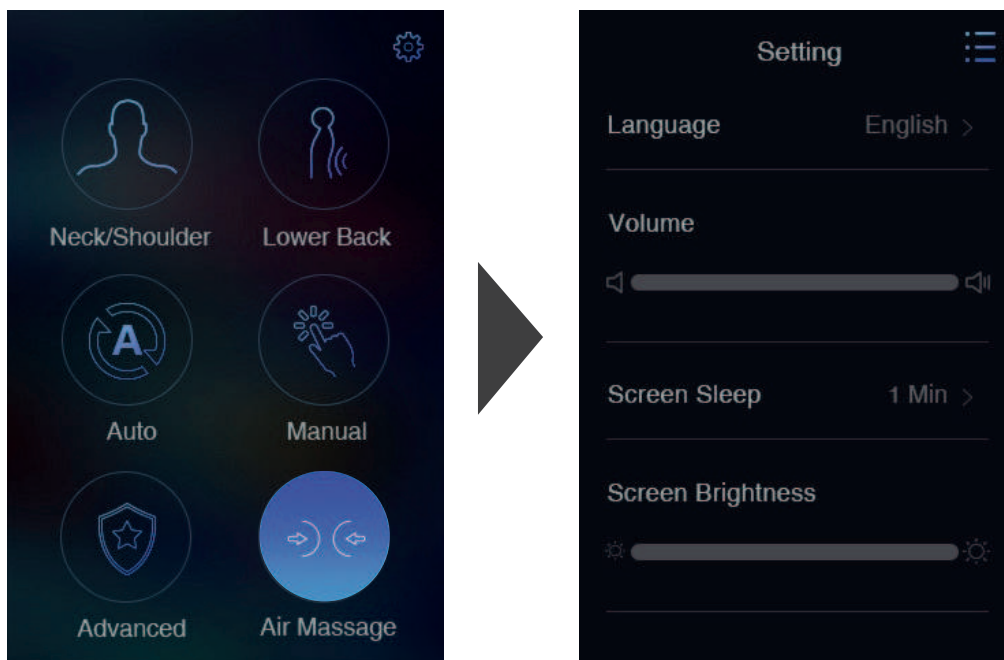

8. Назад

- Натиснете  в горния десен ъгъл, за да се върнете на предишната страница.

Дистанционно управление

9. Бутони за бърз достъп



10. Използване на BLUETOOTH високоговорителите

- Включете Bluetooth функцията на мобилното устройство, с което желаете да свържете креслото.
- Потърсете името на масажното кресло "Aura music" и се свържете с него - парола - 9999
- Ако свързването е успешно Bluetooth високоговорителите ще възпроизведат звука/музиката от мобилното устройство.

СЛЕД УПОТРЕБА

- Изключете креслото от дистанционното управление.
- Натиснете основния бутон за включване и изключване на креслото. Бутонът трябва да застане в позиция „О“.
- Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.


ВНИМАНИЕ!

След използване на креслото се препоръчва, то да се изключи от основния бутон за включване и изключване и след това от електрическата мрежа. В противен случай може да възникнат злополуки и наранявания!


BRAINTRONICS



Технологията

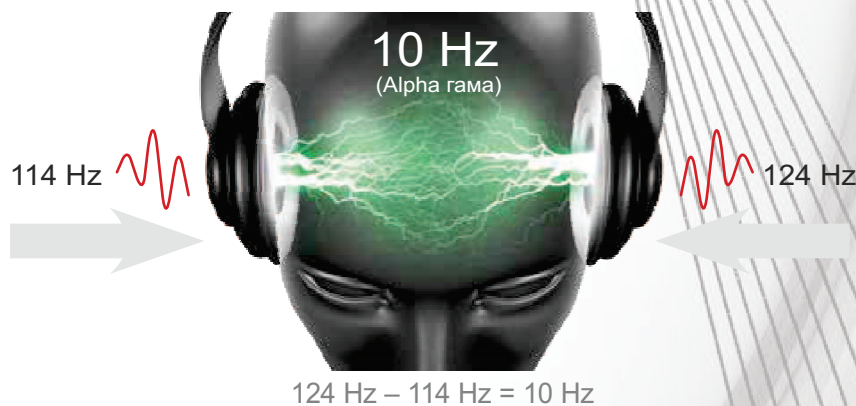


Главната цел на Braintronics е да синхронизира ефективно мозъчните вълни до желаното състояние на мозъчна активност. Без значение дали искате да релаксирате, сънувате или учите - всичко е възможно. При редовно използване, системата Body&Mind (Тяло&Ум) постепенно ще „научи“ мозъчните Ви вълни да се справят със стреса, да преодоляват тревожността, да бъдат по-балансираны и да се повиши физическата и умствената продуктивност.

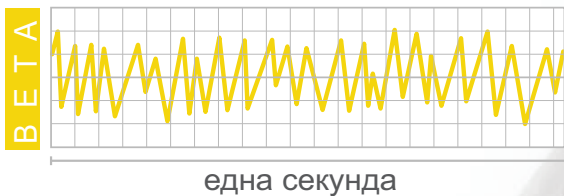


Бета диапазон | честота 14 – 30 Hz

- > Състояние на тревога
- > Фокусиране
- > Умствена дейност
- > Логично / Аналитично мислене

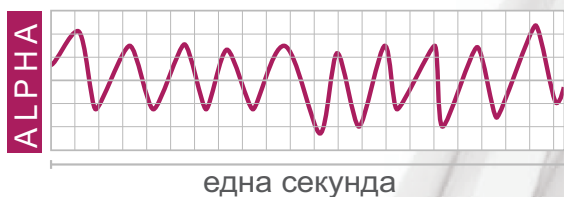


Алфа диапазон | честота 7 – 14 Hz

- > Отпуснато състояние и заспиване
- > Креативност
- > Спокойствие

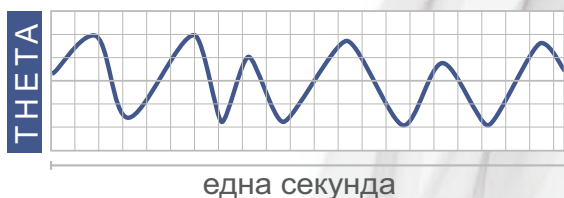

Тета диапазон | честота 3 – 7 Hz

- > Състояние на сън
- > Най-дълбоката релаксация
- > Пластична памет
- > Изключителна креативност и въображение

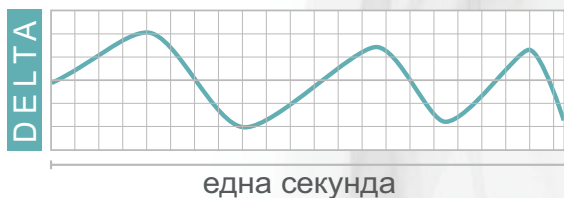


Делта диапазон | честота 1 – 3 Hz

- > Дълбок сън
- > Транс

Технологията


Аудио стимулацията на мозъчни вълни Braintronics обикновено започва в долния Бета честотен диапазон. За по-лека и умерена синхронизация, системата бавно насочва Вашите мозъчни вълни до горните, а след това до долните Алфа честоти. Аудио стимулацията използва Тета и Делта вълни за регенерация и дълбока релаксация.

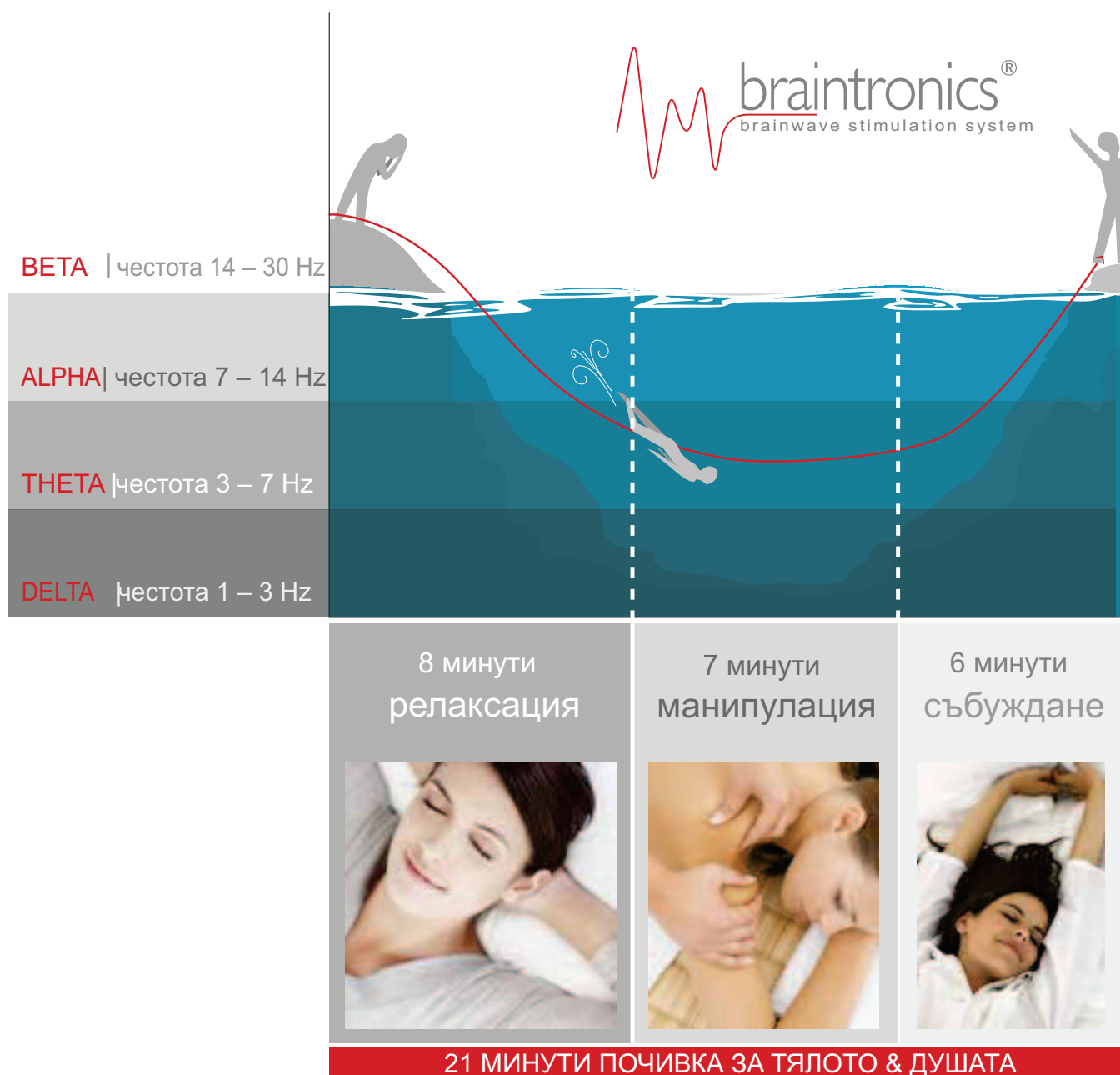

BMS – Синхронизираща система Тяло&Ум (Body&Mind)



Системата Тяло&Ум (BMS) синхронизира Вашите мозъчни вълни чрез аудио стимулация. Системата, съчетана със специално развита масажна програма, помага на стресираното Ви тяло да релаксира. Изследванията показват, че когато се комбинират масаж и стимулация на мозъчните вълни, състоянието на релаксация е до 80% по-ефективно. Резултатите от изследванията показват, че целенасочената стимулация на мозъчните вълни подобрява концентрацията и продуктивността, и осигурява умствено и физическо облекчение.

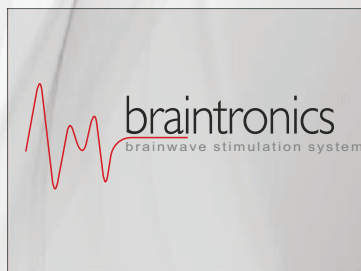

BMS – Синхронизираща система Тяло&Ум (Body&Mind)

Увлечението на мозъчните вълни работи с електрическите реакции на мозъка. То отговаря на ритмична и/или сензорна стимулация, като звукови и светлинни импулси.

Когато мозъкът е изложен на стимулация, като звук в ушите, светлина в очите и др., той отговаря на тези стимулации с така наречената кортикално предизвикана реакция. Тези електрически импулси могат да бъдат измерени в рамките на мозъка и са винаги в отговор на това, което виждаме и чуваме. Мозъчната активност може да бъде измерена чрез чувствителни електроди, поставени върху скалпа.

ЕЕГ (Електроенцефалограма) тестове показват, че мозъкът е индуциран да съответства с определени честоти. Процесът, с който мозъкът изравнява преобладаващата честота на мозъчните вълни с входящата честота, се нарича „увлечение“.

Не винаги хората сме способни да се мотивираме сами, което е напълно нормално. В такъв случай BMS системата може да бъде наше убежище. Медитация, комбинирана със синхронизация на мозъчните вълни и хубав масаж - това е цялостната концепция на системата „Тяло&Ум“.

Мотивацията и продуктивността на работниците намалява, поради увеличаване на изискванията, без осигуряване на баланс за тялото и мозъка. Умственото изтощение спомага за психическа и физическа отпадналост. BMS системата позволява на работодателя да има активно въздействие върху благосъстоянието на служителите си. С натискането на един бутон потребителят се потапя в свят на спокойствие и релаксация, след което продължава работния си ден ободрен и фокусиран.

Ползите от Braintronics

- > Облекчение на стреса
- > Дълбока релаксация само след няколко минути
- > Спокойствие
- > Устойчивост на стрес
- > Баланс на тяло и мозък
- > Подобрена концентрация
- > Подобвени реакции
- > Повишена продуктивност
- > Повишена мозъчна активност
- > Интуитивно взимане на решения
- > Медитативно преживяване
- > Умствена сила
- > Подобрена мотивация
- > Енергия и жизненост
- > Креативност




BRAINTRONICS® APP

MANUAL

- !** Преди да започнете braintronics® сесия се уверете, че Вашият уред Casada е свързан с източник на захранване, както и че Bluetooth е активиран на Вашия смартфон/таблет и имате активна интернет връзка.


Инсталиране чрез APP STORE

1. Отворете Play Store / App Store на Вашия смартфон или таблет.
2. Търсете за приложението braintronics® .
3. Инсталирайте приложението.

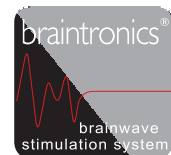


Инсталиране чрез QR CODE

1. Сканирайте този QR код, използвайки телефона/таблета си.

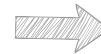


2. Кодът ще Ви препрати към приложението. Инсталирайте го.

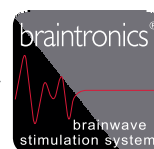


Създаване на акаунт

След като сте инсталирали приложението за първи път, трябва да създадете Ваш потребителски акаунт.

За да направите това, кликнете на „Create Account“ (Създай акаунт, фиг. 1). Въведете нужните данни, след което кликнете отново на „Create Account“ (фиг. 2).

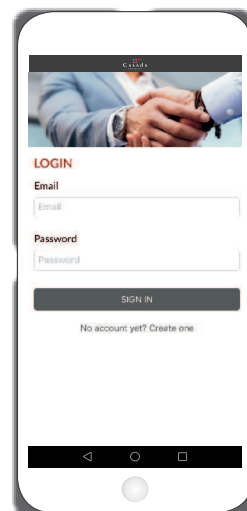

фиг. 1

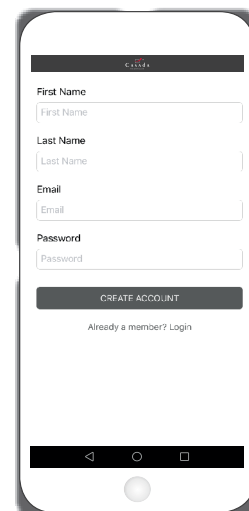


фиг. 2

Вход и меню

Въведете Вашия имейл и паролата си, след което кликнете на „Sign in“ (Вписване).


След успешен вход на екрана ще се появи главното меню на приложението.

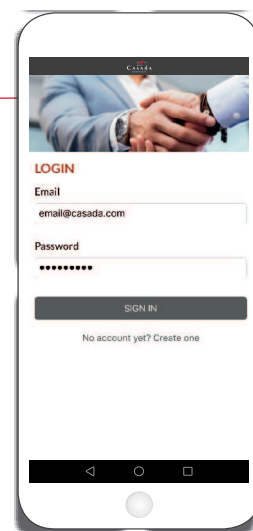


Език

За да изберете език, с който да работи приложението, натиснете бутона във формата на колело, намиращ се в горния десен ъгъл и задайте желанния език (фиг. 1).

Върнете се към главното меню като кликнете на стрелката в горния десен ъгъл или бутона за връщане назад на Вашия смартфон / таблет (фиг. 2).

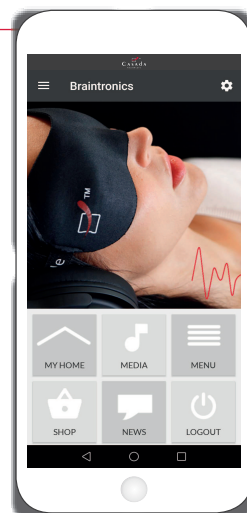


фиг. 1

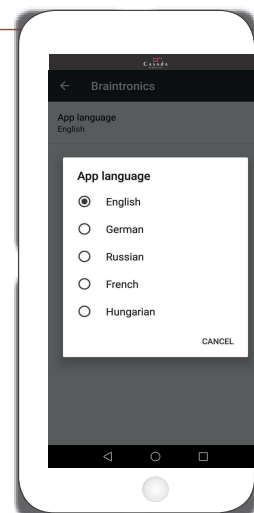


фиг. 2

Пазаруване


1. Изберете езика, на който искате да говори приложението (фиг. 1).
2. Изберете една от категориите с мелодии за релаксация и медитация, от която искате да слушате (фиг. 2).
3. При регистриране на Вашия уред, получавате една мелодия безплатно. Останалите мелодии в приложението са платени. Изберете определена мелодия от категорията (фиг. 3).
4. Потвърдете закупуването на мелодията, натискайки бутон „Buy“ (фиг. 4).
5. За да влезете в детайлното меню, кликнете на бутона с три линии в горния ляв ъгъл (фиг. 5).

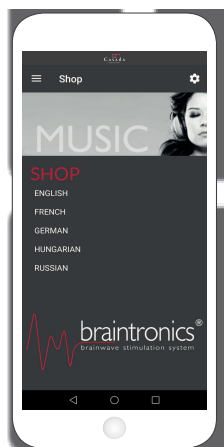


фиг. 1

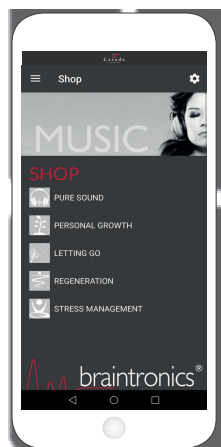


фиг. 2

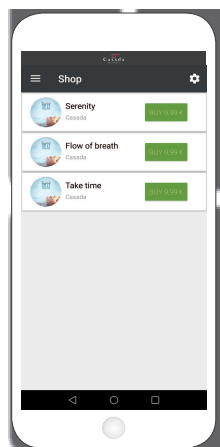

фиг. 3

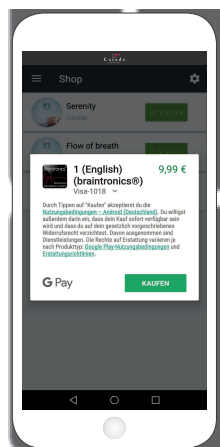

фиг. 4

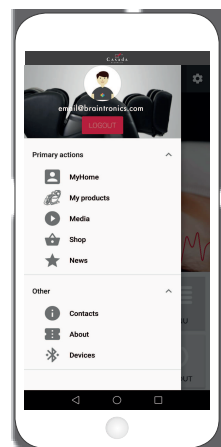


фиг. 5


Моите продукти

В категория „My products“ (моите продукти) можете да регистрирате Вашия уред Casada, който има функция braintronic (фиг. 1).

Изберете Вашия продукт от листа с предложените такива (фиг. 2).

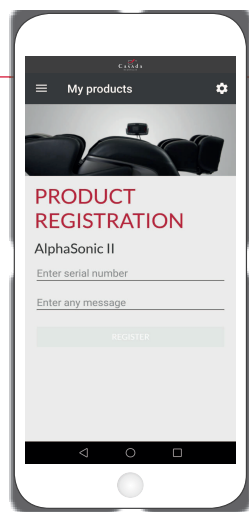

фиг. 1

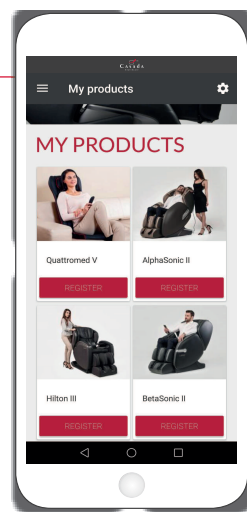

фиг. 2


Bluetooth връзка с Android

1. Кликнете на „Devices“ в менюто (фиг. 1).
2. Кликнете „Allow“ („Позволи“), фиг. 2.
3. От листа с изброени продукти на Casada, изберете желанието от Вас продукт и се свържете с устройството с парола 1234 (фиг. 3).


* За да изберете масажирания модул на креслото, изберете BLUETOOTH устройството с разширение „BT“

Bluetooth връзка с iOS


1. Кликнете на „Devices“ в менюто (фиг. 1).
2. Ако Bluetooth все още не е активиран (фиг. 4), плъзнете бутона в горния десен ъгъл надясно, като той трябва да се оцвети в зелено (фиг. 5).
3. От листа с изброени продукти на Casada, изберете желанието от Вас продукт, който искате да използвате (фиг. 5).

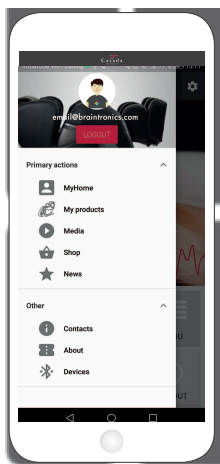


фиг. 1

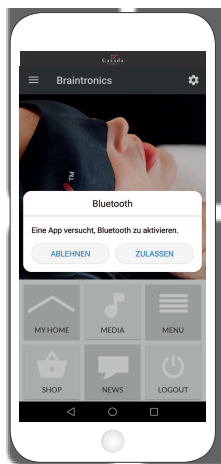


фиг. 2

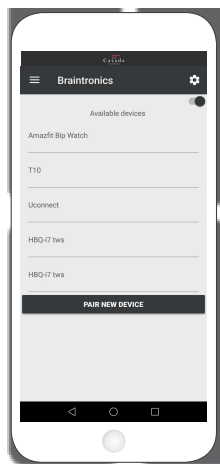

фиг. 3

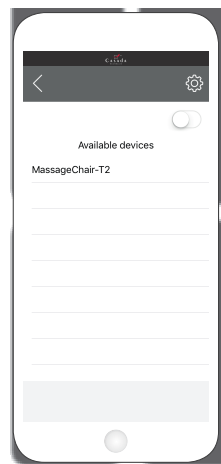

фиг. 4

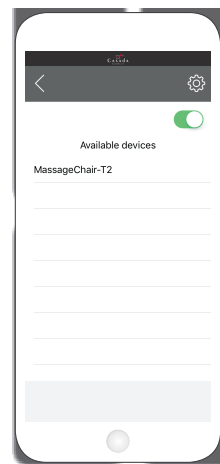


фиг. 5

Медия и Плейър

За възможно най-добро и цялостно преживяване от Braintronics Ви препоръчваме да използвате системата, като включите качествени стерео слушалки към смартфона/таблета си. По този начин ще изключите външния свят изцяло и ще постигнете точната цел на програмата. Кликнете бутон „Media“ („Медия“) в менюто и изберете желаната мелодия.

След потвърждение приложението автоматично пуска мелодията и масажната програма Braintronics. Можете да сложите на пауза, за да излезете от приложението по-рано или да смените мелодията.

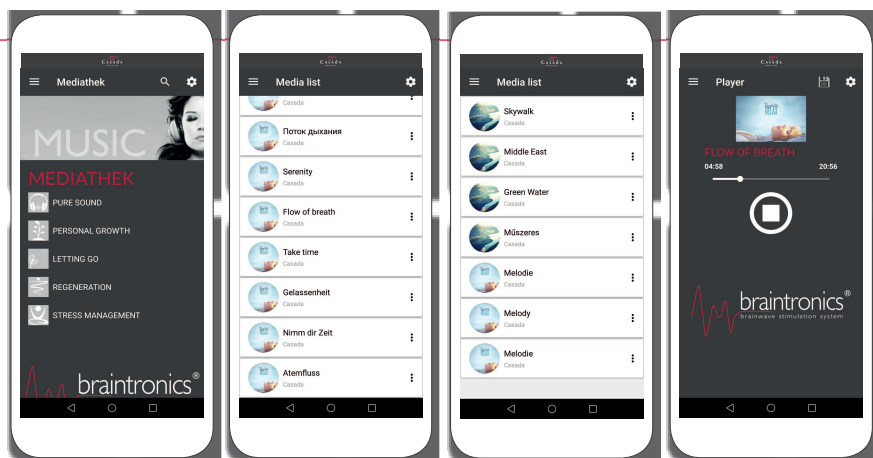

Новини

В секция „News“ („Новини“) ще получавате новини, когато има нова мелодия. Също така там се публикуват и интересни статии и информация на теми, свързани със стрес, релаксация, масаж и медитация и др.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- Заявка за ремонт на закупената стока се приема в устна или писмена форма, на адреса на седалището на фирма „Ню Вижън Бутик“ ЕООД или на адресите, посочени в тази гаранционна карта.
 - При подаване на заявка за ремонт-рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 - Гаранционна карта;
 - Касова бележка или фактура;
 - Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 - Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
 - Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер (ако има), подпис на клиента, дата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни.
 - Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 - При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
 - Когато е правен опит за ремонт, монтаж или демонтаж;
 - Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
 - При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори, извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
 - При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на производителя, вносителя, търговеца или сервиза.
 - При използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови уреди за професионални или търговски цели, в заведения, хотели, отдаване под наем и др.
 - При работа с нестандартна захранваща система с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
 - На гаранционно обслужване не подлежат:
 - Всички външни части, които могат да бъдат повредени по невнимание от клиента, аксесоари, шалтета, тапицерии, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления, както и непознаване инструкцията за експлоатация на уреда.
 - При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, търговецът е длъжен по своя преценка да:
 - Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, срокът за ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 - Ако ремонтът на стоката е невъзможен или неоправдан, да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяната на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребител гаранционните условия.
 - Ако няма същия модел, да предложи аналогичен или друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума.
 - В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока, или не се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.
 - Производителят, вносителят, търговецът или сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой или други, вследствие на дефекта на стоката или престоя ѝ в сервиза.
 - По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока.
 - При получаване на отремонтираната стока:
 - Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
 - Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
 - Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента, съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за не-гаранционно обслужване.
 - При съгласие се подписва Протокол за споразумение.
 - При несъгласие се попълва Констативен протокол.
- Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП и по-точно, независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

Верига магазини New Vision Boutique:

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg

СОФИЯ

Щанд в Хипермаркет Технополис Младост
Ж.к. Младост 4, Околовръстен път № 265
Тел: 0884 123 501

Щанд в Хипермаркет Технополис Люлин
Бул. Царица Йоана (до метростанция Люлин)
тел: 0884 142 351

Щанд в Хипермаркет Технополис The Mall
Бул. Цариградско шосе № 115
Тел: 0887 103 914

ПЛОВДИВ

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Санкт Петербург № 133 (до Метро)
Тел: 0885 306 708

СТАРА ЗАГОРА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Ул. Никола Петков № 50
Тел: 0885 306 735

ВАРНА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Владислав Варненчик № 277 (до Елпром)
Тел: 0884 601 427

Магазин New Vision Boutique, МОЛ Варна, партер
Бул. „Владислав Варненчик“ № 186
Тел: 0884 614 287

БУРГАС

Щанд в Хипермаркет Технополис
К-с Славеиков № 94 (до РУМ Младост)
Тел: 0884 620 997

Щанд в хипермаркет Технополис
ул. "Транспортна" № 53
Тел: 0887305596

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за Вашия избор!

Моля, прочетете внимателно условията за гаранционно обслужване, както и инструкцията за експлоатация и следете за стриктното им изпълнение. Изисквайте точното и пълно попълване на всички позиции от гаранционната карта! Пазете касовата бележка!

ВИД ПРОДУКТ	Масажно кресло
МОДЕЛ	"Aura" CMS - 551 / CMS - 553
ФАБРИЧЕН НОМЕР	
ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК	24 месеца (2 години)
МАГАЗИН/ОБЕКТ	
ПРОДАВАЧ	
СЕРВИЗ (ПЕЧАТ)	

Купувач:..... Тел:.....

Адрес:.....

Запознат съм и приемам условията на гаранцията!

Стоката е изпробвана и предадена с пълна комплектация и документация!

.....

(Подпис на купувача)

С тази гаранционна карта НЮ ВИЖЪН БУТИК ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, Околовръстен път 265, Хипермаркет Технополис, поема настоящите гаранционни задължения към потребителите и определя реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да допълват или да изменят условията на тази гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката. Настоящата търговска гаранция е валидна само на територията на Република България.

* * *

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 -115 от Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

Ню Вижън Бутик ЕООД

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116

www.vip-giftshop.com